

BRUKSANVISNING

Modell: VIC821V FFP2 NR D

Produsent: YANGXI VENUS PPE MANUFACTURE LTD.

LEGG TIL: No.23 Xincheng Industrial Zone, Yangxi fylke, Yangjiang by, Guangdong, Kina

INSTRUKSJONER FOR BRUK

1. Unnlatelse av å følge alle instruksjoner og begrensninger kan alvorlig redusere effektiviteten til dette åndedrettsvernet og kan føre til sykdom, skade eller død.
2. Det er viktig å velge riktig åndedrettsvern. Før yrkesbruk må brukeren få opplæring av arbeidsgiveren i riktig bruk av åndedrettsvernet i henhold til gjeldende sikkerhets- og helsestandarder.
3. Dette produktet leverer ikke oksygen. Bruk kun i tilstrekkelig ventilerte områder som inneholder nok oksygen til å opprettholde liv.
4. Kast åndedrettsvernet og bytt det ut hvis:
 - a. overdreven tilstopping av åndedrettsvernet forårsaker pustevansker.
 - b. åndedrettsvernet blir skadet.
5. Forlat det kontaminerte området umiddelbart dersom du opplever svimmelhet, irritasjon eller andre former for ubehag.
6. Oppbevar åndedrettsvern i utstillingsesken, beskyttet fra direkte sollys, frem til bruk.
7. Før bruk masken tas i bruk må brukere av åndedrettsvern sjekke om det er sprekker eller flekker rundt sveiseområdet. Hvis det er det, må masken kastes umiddelbart og ikke brukes igjen.
8. Oppbevar de ubrukte åndedrettsvernene i den lukkede esken og oppbevar den på et tørt, ikke-kontaminert område mellom -30 °C og +50 °C. Lagringstid er 3 år fra produksjonsdato.

BRUKSBEGRENSNINGER

1. IKKE bruk åndedrettsvernet eller gå inn i eller opphold deg i et kontaminert område under følgende omstendigheter:
 - a. atmosfære inneholder under 19,5 % oksygen.
 - b. hvis du lukter eller smaker kontaminant.
 - c. for beskyttelse mot gasser eller damper.
 - d. kontaminanter eller deres konsentrasjoner er ukjente eller umiddelbart farlige for liv eller helse.
 - e. konsentrasjoner av forurensninger overstiger maksimale brukskonsentrasjoner i gjeldende OSHA-standarder eller gjeldende offentlige forskrifter eller 12 (FFP2) ganger PEL (tillatt eksponeringsgrense), avhengig av hva som er lavere.
 - f. For sandblåsing, malingssprøyteoperasjoner og asbest.
 - g. Bruk i eksplosive miljøer.
2. IKKE modifier eller misbruk åndedrettsvernet.
3. IKKE bruk åndedrettsvernet med ansiktshår eller andre forhold som kan forhindre en god ansiktsforsegling.
4. NR betyr ikke til gjenbruk. Maksimal påføringstid eller maksimal partikkeleksponering for ett enkelt skift.
5. D-dolomitt, de partikkelfiltrerende halvmaskene har bestått lagringstesten med dolomitt.
6. Ingen filtrerende åndedrettsvern i beholdere, tanker, kanaler.

TILPASNINGSinstruksjoner

1. Hold åndedrettsvernet i hånden med den konturformede delen av åndedrettsvernet pekende opp. La

hodebåndene henge fritt.

2. Plasser åndedrettsvernet under haken, så det dekker munn og nese.

3. Trekk det nedre hodebåndet over hodet, og plasser det under ørene. Trekk det øverste hodebåndet på baksiden av hodet over ørene for best passform. Bøy neseklemmen rundt fingrene for å danne en neseform.

4. Bruk begge hender, form neseklemmen rundt nesen og flytt hodestroppene for å sikre en positiv ansiktsforsegling.


5. Tetningssjekk:

- For å teste passformen til et åndedrettsvern uten utåndingsventil holder du begge hendene over åndedrettsvernet og puster kraftig ut.
- For å teste passformen til et åndedrettsvern med utåndingsventil, legger du begge hendene over masken og inhalerer kraftig. Et undertrykk skal oppdages inne i åndedrettsvernet.
- Hvis det merkes luftstrøm i neseområdet, juster/stram neseklemmen på nytt.
- Hvis luftstrøm merkes rundt kantene på åndedrettsvernet, flytter du åndedrettsvernet/hodestroppen for å oppnå en bedre passform.


6. Bytt masken umiddelbart hvis det blir vanskelig å puste eller masken blir skadet eller deformert.

7. Bytt åndedrettsvern hvis en ordentlig ansiktsforsegling ikke kan oppnås.


8. Nøye overholdelse av disse instruksjonene er et viktig skritt i sikker bruk av åndedrettsvern.

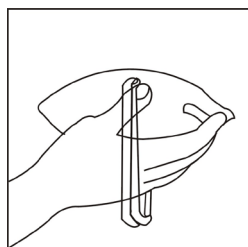

Se informasjon fra
produsenten

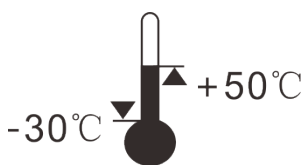

Temperaturområde
for lagringsforhold

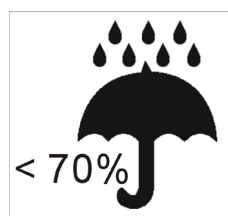

Maksimum relativ
fuktighet for
lagringsforhold

WARNING:

Denne åndedrettsvernet beskytter mot visse partikkelkontaminanter, men eliminerer ikke eksponeringen for eller risikoen for å pådra seg sykdom eller infeksjon. Feil bruk kan føre til sykdom eller død. Hår, skjegg, kinnskjegg og anomalier i hodet under forseglingslinjen vil påvirke forseglingen av åndedrettsvernet.

Disse filtrerende åndedrettsvernene er i samsvar med bestemmelsen i PVU-forskriften 2016/425 og, der det er aktuelt, er identiske med personlig verneutstyr som er gjenstand for EC-typen i henhold til den harmoniserte standarden EN149:2001.

BSI Group – NB 2797

Nederland BV, Say Building, John M Keynesplein 9,
1066 EP, Amsterdam, Nederland.